

Nowość w dermatologii estetycznej!!!

CRYO mini Derma Cooler

W celu maksymalnego komfortu pacjenta oraz aby zminimalizować efekty uboczne podczas zabiegów estetycznych laserami dermatologicznymi proponujemy najnowszy aparat chłodzący skórę zimnym powietrzem.



Cryo mini z pantografem


Urządzenia Zimmer do profesjonalnego chłodzenia skóry pacjenta podczas zabiegu laserami dermatologicznymi.

Cryo Derma Cooler wprowadza terapię laserem na nowy poziom!

- Może być stosowany do każdego lasera oraz IPL
- Redukuje nieprzyjemne odczucia pacjenta podczas zabiegu
- Minimalizuje rumień, chroni tkankę i skórę przed termicznym uszkodzeniem
- Nie wymaga żadnych dodatkowych kosztów eksploatacyjnych
- Posiada precyzyjny 9-stopniowy system sterowania chłodzeniem
- **Cryo Derma Cooler** jest zawsze gotowy do pracy
- Niezwykle lekki wąż zabiegowy nie obciąża ręki lekarza podczas zabiegu
- Możliwość użycia pantografu umożliwi swobodne operowanie sondą lasera i chłodzenie większej powierzchni skóry

Cryo mini Derma Cooler służą jako chłodziarki do zabiegów laserami dermatologicznymi. Stała temperatura wydmuchiwanego powietrza, stabilne chłodzenie skóry podczas zabiegu laserowego oraz daleki zasięg chłodzenia doskonale sprawdzają się w klinikach i gabinetach estetyki ciała.

Dzięki zastosowaniu specjalnego uchwytu możliwe jest jednoczesne trzymanie sondy laserowej i końcówki węża chłodzącego. Do wielu laserów firma Zimmer produkuje współpracujące uchwyty zabiegowe min. Candela, Fraxel, Wave Light, Syneron i inne.

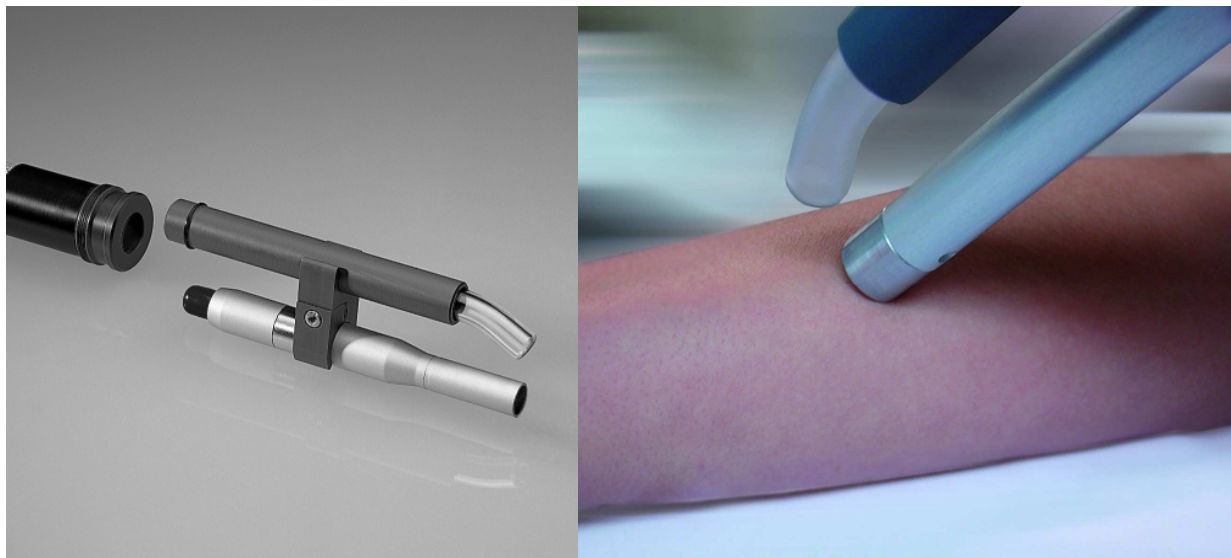

Przykładowe uchwyty łączące laser z aparatem Cryo 5 i Cryo 6 Derma Cooler

Jeżeli z przyczyn konstrukcyjnych niemożliwe jest zastosowanie uchwytu łączącego do Państwa lasera proponujemy tzw. „trzecią rękę” – pantograf. Umożliwia on ustawienie węża zabiegowego w praktycznie każdej pozycji. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne, które wybiera zdecydowana większość Klientów.

Poza kosztem zakupu aparat nie wymaga żadnych dodatkowych kosztów!!

Oferujemy także profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Opis urządzenia

CRYO Derma Cooler jest urządzeniem o zwartej konstrukcji, przejezdny na 4 kółkach. Urządzenie zasysa powietrze z otoczenia poprzez filtr z tyłu obudowy, a następnie wykorzystując zasadę zamkniętego układu chłodniczego schładza powietrze do temperatury zabiegowej ok. -16°C . Schłodzone powietrze zostaje wydmuchane poprzez wąż zabiegowy.